

# CTG-Geräte

## Bionet TwinView FC 1400



Das FC 1400 ermöglicht durch seine zwei US-Sonden die Überwachung der fetalen Herzfrequenz auch bei Zwillingsetsen und kann sie samt der Wehentätigkeit auf dem LCD-Farb-Display in Echtzeit darstellen und bei Bedarf ausdrucken. Das Gerät speichert alle Daten der letzten 12 Betriebsstunden und kann diese jederzeit wieder im Display wiedergeben und bei Bedarf in Hochgeschwindigkeit ausdrucken.

Es verfügt über zwei 1-MHz US-Sonden, ausgestattet mit der 9-Kristall-Technologie, welche die Gefahr der Signalunterbrechung drastisch vermindert.

Durch die Möglichkeit mit einer aufladbaren Akku-Batterie (optional) zu arbeiten, kann die Überwachung bis zu zwei Stunden vom Stromnetz unabhängig durchgeführt werden, was z. B. die Ableitung während des Transportes ermöglicht.

### Leistungsmerkmale:

- großes LCD-Farb-Display
- Zwillingüberwachung und automatische Aufzeichnung der fetalen Kindsbewegungen
- 12-Stunden Speicher
- übersichtliche Aufzeichnung auf DIN A4-Papier (auch Faxpapier möglich)
- High-Speed-Ausdruck der gespeicherten Daten möglich
- optional: Betrieb mit Akku-Batterie
- 2 Jahre Garantie

### Standardzubehör:

- 2 US-Sonden
- 1 TOCO-Sonde
- 1 Ereignismarker
- 2 Rollen CTG-Papier
- 1 Power-Adapter
- 1 Tube Gel, 3 CTG-Gurte
- 1 Bedienungsanleitung



### Technische Daten:

Größe:	296 x 306 x 98 mm
Gewicht:	3,2 kg
Display:	320 x 240 mm
Drucker:	Thermal Array Type 1,2,3 oder 12,5 cm/min
US-Frequenz:	1,0 Mhz
Messgrenzen:	50-240 bpm
Toleranz:	+/- 1 Hz bpm

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
9913	2.090,00 €

**Leasingangebot auf Anfrage !**

## Bionet Fetalmonitor FC 700



### Leistungsmerkmale:


- Single-Modell mit integriertem Thermodrucker
- übersichtliche Aufzeichnung auf DIN A4-Papier
- 1 MHz Ultraschallsonde
- Überwachung von Kindsbewegungen
- Handschalter zur Ereignismarkierung
- übersichtliches Bedienfeld mit Datendisplay
- 2 Jahre Garantie

### Standardzubehör:

- 1 US-Sonde
- 1 TOCO-Sonde
- Ereignismarker
- Papier
- Netzteil
- Gel
- Gurte
- Handbuch

Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis zzgl. MwSt.
9538	Fetalmonitor FC 700	1.350,00 €


### Zubehör FC 700:

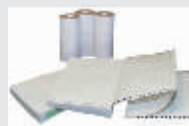

CTG-Papier  
rotes Raster

Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis zzgl. MwSt.
9537	CTG-Papier	6,90 €

### Zubehör FC 1400:

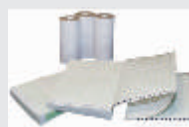

CTG-Papier  
Rolle Thermo-Papier  
152 mm x 25 m

Batterien  
Ni-MH Akku-Batterie, 12 V,  
2600 mA

Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis zzgl. MwSt.
9744	CTG-Papier	6,90 €
9912	Akku-Batterie *	129,00 €

\* Bitte beachten Sie, das der Einbau werkseitig erfolgen muß !