

AERObag® BBS-B Beatmungsbeutel für Babys und Frühchen

Siliconbeutel mit 300 ml-Volumen, einsetzbar bis 8 kg, autoklavierbar

SPAR-Set bestehend aus:

- 1 Silicon Beatmungsbeutel
- 1 Maske Größe 0
- 1 Maske Größe 1
- 1 O₂-Schlauch
- 1 Reservoirventil

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
9676	120,00 €



Beatmungsbeutel P mit PEEP-Ventil für Babys

Selbstexpandierender Beatmungsbeutel aus Silicon mit Patientenventil mit PEEP, Einlassventil mit Überdruckventil, Faltenschlauch und Rendell-Baker-Beatmungs-Maske Größe 1. Beatmungsvolumen bis 320 ml/Kompression, Atemfrequenzen von 60 Atemhubvolumen/min. erreichbar. Mit oder ohne PEEP einsetzbar.


Eine einsetzende Spontanatmung ist ungehindert möglich. Das Überdruck-Sicherheitsventil öffnet bei ca. 30 - 35 mbar.

Best.-Nr.	Modell	Preis zzgl. MwSt.
6949	Translucent	149,00 €
8145	mit Antistatikhülle	159,00 €



Sauerstoffreservoir

Best.-Nr.	Modell	Preis zzgl. MwSt.
10743	für Beatmungsbeutel P	17,85 €

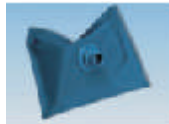

Einweg-Notfall-Beatmungsbeutel mit Überdruckventil

Erwachsenenbeutel PVC - Einweg - 1550 ml mit Maske Gr. 5, O₂-Reservoir und O₂-Leitung

Babybeutel PVC - Einweg - 280 ml mit Maske Gr. 0, O₂-Reservoir und O₂-Leitung

Best.-Nr.	Modell	Preis zzgl. MwSt.
10488	Erwachsenenbeutel	29,00 €
10487	Babybeutel	29,00 €



COMBIBAG Beatmungsbeutel für Erwachsene und Kinder

- mit Klarsichtmaske für Erwachsene Gr. 5 -

Die gegenüberliegenden Griffmulden unterteilen den Beutel in zwei verschiedenen große Beatmungssegmente: Bis zu 500 ml für Kinder, bis zu 1000 ml für Erwachsene. Das Sicherheitsventil begrenzt den Beatmungsdruck durch Stufe 1 für Kinder oder bei Maskenbeatmung von Erwachsenen auf 20 mbar und durch Stufe 2 für intubierte Erwachsene auf 60 mbar.

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
3613	187,00 €



Wie lange kann ich beatmen?

Beispiel:

Mit einer 1 Liter-O₂-Flasche bei Beatmung mit einem Durchflussvolumen von 5 Liter/min. (1 ltr x 200 bar : 5 ltr/min. = 40 Minuten)

Zubehör:

Rendell-Baker Beatmungsmaske für Säuglinge



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
3606	12,75 €

SILICON Beatmungsmasken

Aus transparentem Silicon, autoklavierbar bis 122° mit ISO-Norm-Anschluss.



Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
8208 Größe 0 Säugling	12,75 €
9151 Größe 1 Baby	12,75 €
9186 Größe 2 Kind	12,75 €

OxiPen Pulsoximeter



Kompaktes, funktionelles Pocketdesign. Beleuchtbare LCD-Anzeige für SpO₂- und Pulswerte. Balkenanzeige der aktuellen Durchblutungsstärke. Signalton mit wechselnder Frequenz zur akustischen Kontrolle des SpO₂-Wertes (abschaltbar). Permanente Überprüfung der Signalqualität mit farbiger LED-Anzeige. Optimale Messergebnisse durch integriertes „AL“-System zur Artefaktunterdrückung. Verschiedene Sensoren optional verfügbar (für Neugeborene, Kleinkinder, Kinder, Erwachsene).

Messbereich:	SpO ₂ : 45 - 100 %
Pulsfrequenz:	20 - 300 1/min
Größe:	13,6 x 3,2 x 2,4 cm / 72 g

Standardzubehör

OxiPen Pulsoximeter inkl. Batterien und Y-Sensor (für Babys und Kleinkinder)

Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
7575	379,00 €